

NITRILE	BLEU	NON POUDRÉ	XS-XL	AMBIDEXTRES	NON STÉRILES
----------------	-------------	-----------------------	--------------	--------------------	-------------------------

Gants confortables en nitrile. Ils protègent contre les risques chimiques spécifiques et les solvants en contact sporadique. Une excellente préhension en milieu humide ou sec. Il offre une grande variété d'utilisations générales dans les secteurs de l'alimentation, de l'exploration et des examens médicaux, des laboratoires, de l'hygiène et du nettoyage, de la coiffure, etc. Procédures d'examen standard et à risque modéré.

Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

Caractéristiques:

Ils ne contiennent pas de protéines de latex, conviennent aux personnes allergiques au latex.	Texturé aux doigts. Prise en main facile.
Bleu, sans poussière, à usage unique, ambidextres.	Grande résistance et durabilité.
Manchette à rebord, protection contre les déversements.	Flexibilité et adaptabilité.




Dimensions du gant	S	M	L	XL
Longueur DE LA PAUME	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
Longueur manchette	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur paume mm (± 0.02)	0.07 mm	0.07 mm	0.07 mm	0.07 mm
Épaisseur des doigts mm (± 0.02)	0.11 mm	0.11 mm	0.11 mm	0.11 mm
Épaisseur du poignet mm (± 0.02)	0.06 mm	0.06 mm	0.06 mm	0.06 mm
Poids grammes (± 0.3)	3.2 gr	3.5 gr	3.7 gr	3.9 gr

RUBBEREX SPAIN S.L

Règlementation:

- Catégorie III. Marquage CE conformément au Règlement (UE) 2016/425.
- Classe I. Selon le Règlement (UE) 2017/745 réglementant les dispositifs médicaux, qui transpose la directive 93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux.
- Règlement alimentaire 10/2011 sur les matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- ASTM F1671 et ASTM F1670. Résistance à la pénétration du sang et des virus bactériophages.
- ISO 16604:2004. Bactériophage.
- ASTM D6978, résistance aux médicaments de chimiothérapie.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Point 7 de la norme EN374-2. Point 5 de la norme EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5:2016. Exigences relatives aux risques liés aux micro-organismes. (Champignons, virus et bactéries).
- EN ISO 21420:2020.
- EN 420:2003+A1:2009.
- EN 455-1-2-3-4. Résistance à la rupture après vieillissement 6.01N. Pendant la durée de vie de l'appareil. 6.24N.

ENISO 374-1:2016:A1:2018 / EN ISO 374-5:2016
Type B

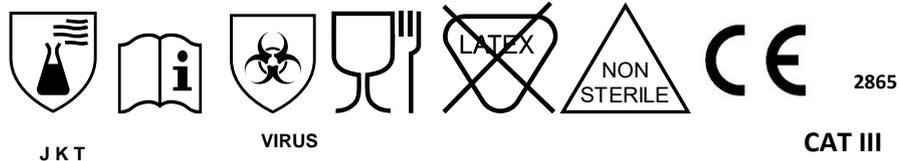

RUBBEREX SPAIN S.L

Résistance chimique:

PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1.2018

Les gants sont classés en fonction du temps de pénétration, selon chaque produit chimique pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants:

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	6	J
HYDROXYDE DE SODIUM 40%	6	K
FORMALDÉHYDE 37%	2	T

Durée de passage (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

DÉGRADATION EN ISO 374-5

Le % de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique utilisé dans la perméation.

(DR) J : N-Heptane = 61%

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40% = 151%

(DR) T : Formaldéhyde 37% = 26%

Le GANT NITRILE type EPI « GENTLE TOUCH BLEU » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.


Étiquetage:

Date de fabrication, date d'expiration, numéro de lot, référence et code EAN. Désignation du produit en plusieurs langues: espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation.

Taille et unités, guide des tailles.

REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN
0138	Bleu	XS	6	8435234501382
0125	Bleu	S	7	8435234501252
0126	Bleu	M	8	8435234501269
0127	Bleu	L	9	8435234501276
0128	Bleu	XL	10	8435234501283

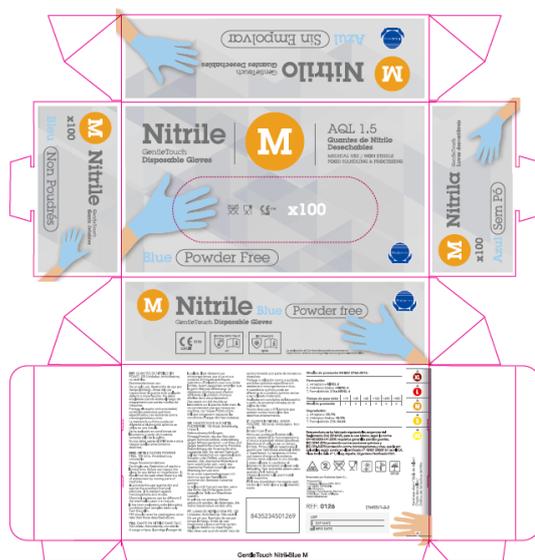

Conditionnement:

Boîte distributrice de 100 pièces, avec ouverture découpée pour un accès hygiénique au gant.

Dimensions : 210 x 60 x 120 mm

10 boîtes de 100 unités par caisse

1000 gants par caisse

77 caisses par palette

REV.03 may 2023