

NITRILO GENTLE TOUCH HQ VERDE



NITRILO	VERDE	SIN POLVO	S-XL	AMBIDIESTRO	NO ESTÉRIL
---------	-------	-----------	------	-------------	------------

Guante confortable. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca el sanitario, exploración y examinación, laboratorio, higiene y limpieza, peluquería, tatuadores, automoción, bricolaje, alimentación, etc.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex. Tipo I.	Texturado en las puntas, facilitando el agarre.
Verde, sin polvo, de un solo uso, ambidiestros, no estéril.	Alta resistencia y durabilidad.
Puño con reborde, protección frente a derrames.	Para una protección superior. Adaptabilidad.

Presentación:

- Caja dispensadora de 100 unidades, con apertura troquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 250 x 130 x 75 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
ANCHO DE PALMA	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 250 mm	Min 250 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Grosor dedo mm (± 0.02)	0.17	0.17	0.17	0.17
Grosor puño mm (± 0.02)	0.09	0.09	0.09	0.09
Peso gr. (± 0.3)	5.8	6.0	6.3	6.5

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

📍 Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (EU) 2016/425.
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimento.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018. Punto 7 EN 374-2. Punto 5 de la norma EN374-4. Método EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5:2016. Riesgos de microorganismos (hongos, virus y bacterias).
- EN420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020.
- EN455-1-2-3-4. Fuerza de Rotura 12.76 N.
- EN ISO 18889:2019- Protección frente pesticidas y trabajadores de explotaciones agrícolas G1.

RESISTENCIA QUÍMICA

PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.

Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
N-HEPTANO	6	J
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	4	P
FORMALDEHIDO 37%	6	T

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) J: n-Heptano= 34.4%

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -5.0%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30%: 13.2%

(DR) T: Formaldehido 37% = 27.05%

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España


NITRILO GENTLE TOUCH HQ VERDE



El EPI tipo GUANTE DE NITRILO “GENTLE TOUCH HQ” debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B EN ISO 374-5:2016

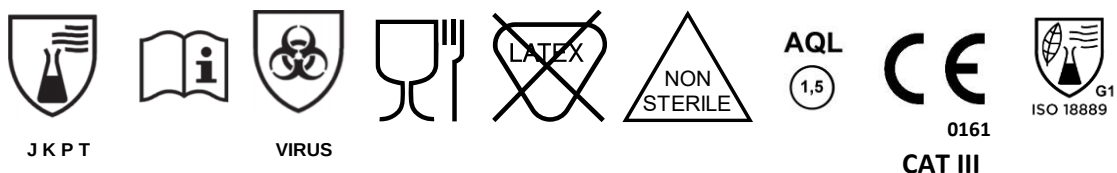

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
0404	Verde	S	7	8435234504048
0405	Verde	M	8	8435234504055
0406	Verde	L	9	8435234504062
0407	Verde	XL	10	8435234504079

Dispensador:

250x75x130mm



Logística:

Dispensador: 100 guantes

Caja: 10 dispensadores por caja

Pallet: 56 cajas

RUBBEREX SPAIN S.L

Rev.13 APR25

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España